

# 取扱説明書

保証書付

## HariFace

家庭用美顔器

HariFace ハリフェイス

品番：HF-MG01



この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」(P.1～4)を必ずお読みください。
- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときは、この取扱説明書・購入証明書の2点を必ず添付してください。

## 目次

目次／安全上のご注意 …… p1	モードの種類 …… p16
ハリフェイスポイント …… p5	各モードのケア方法 …… p17
使いかたの流れ …… p6	よくある質問 …… p20
【本体】【付属品】 各部のなまえ/使いかた …… p7	製品仕様 …… p22
【V/Hポール】 各部のなまえ/使いかた …… p14	保証規定 …… p23
	保証書 …… p24

## 安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- 各区分は、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に分類しています。

### ⚠️ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



禁止


次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤作動を招く原因となります。



【医用電子機器を使用している人】

- ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ・人工心臓など生命維持用医用電子機器
- ・心電計などの装着型医用電子機器


**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 <b>禁止</b>	<p>次のような人は使用しない。 事故やトラブルの原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・心臓疾患、障害及びその疑いのある人</li> <li>・自分で意思表示ができない人</li> <li>・温度や刺激の感覚が自覚できない人</li> <li>・自己免疫疾患のある人</li> </ul> <p>次の人はご使用前に医師にご相談ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・急性疾患の人</li> <li>・感染症疾患の人</li> <li>・悪性腫瘍のある人</li> <li>・有熱性疾患の人</li> <li>・高血圧の人や血液疾患のある人</li> <li>・発熱している人</li> <li>・神経障害のある人</li> <li>・糖尿病などの高度な末しょう循環機能障害による知覚障害のある人</li> <li>・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人</li> <li>・通院して薬を服用中の人</li> <li>・アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症*のある人や使用に際してお肌に不安のある人</li> </ul> <p><small>*今は治っているが、以前かかったことのある病気</small></p>
	<p>次のような場合や部位には使用しない。 事故やトラブルの原因となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合</li> <li>・酒気帯びの場合</li> <li>・口内や陰部、粘膜など</li> <li>・眼球</li> <li>・まぶた(眼窩)</li> <li>・のど</li> <li>・ウイルス性のイボ</li> <li>・骨折をした部位</li> <li>・膨らんだホクロ</li> <li>・美容医療施術後*に内出血や腫れ、かさぶた等のある部位</li> </ul> <p><small>*施術後2週間はご使用を控えていただき、その後必ず医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位</li> </ul>
	<p>水の中に落とさない。水の中につけない。浴室では使用しない。 感電・ショート・発火・故障の原因となります。</p>
	<p>子どもや自分で意思表示ができない人に使わせない。 また身体の不自由な人だけの使用は避ける。 事故・ケガのおそれがあります。</p>
	<p>取扱説明書に記載されている用途以外に使用しない。 ケガ・故障の原因となります。</p>
	<p>本体を落としたり、ぶつけたりしない。 故障の原因となります。</p>

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 <b>分解禁止</b>	<p>分解や修理・改造はしない。 故障・火災・感電・ケガの原因となります。</p>
 <b>必ず守る</b>	<p>お肌に合わないときは使用を中止する。 肌トラブルの原因となります。</p> <p>歯の治療中の人、歯に詰め物がある人は、出力レベルを下げてあてて位置を調整する。 振動により頬・顎に刺激を強く感じたり、不快に感じたりする場合があります。強い違和感を覚える場合は、医師にご相談ください。</p>

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。  
\*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

 <b>禁止</b>	<p>ヘッド部をネックレスなどの金属・物にあてない。 発熱・発火・故障・破損の原因となります。</p>
	<p>電池が漏液して、液が皮膚や衣類に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す。 皮膚がかぶれたりする原因となります。</p>
	<p>お肌に合わないときは使用を中止する。 肌トラブルの原因となります。</p>
	<p>使用中にヘッド部が腫にあたらないようにする。 事故・ケガの原因となります。</p>
	<p>使用前にヘッド部の割れ・変形・破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。 肌トラブル・故障の原因となります。</p>
	<p>ペットには使用しない。 ケガの原因となります。</p>

## ⚠️ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害\*の発生が想定される内容です。  
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。プレテストでお肌に異常が生じた際はご使用をおやめください。使い始めや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。  
事故・ケガの原因となります。身体にならしてから出力レベルを調整してください。

使用時間を守って使用する。

ポイント1か所あたりの目安時間は、約30秒～1分程度あててください。約10～20分の使用時間を目安とし、連続して使用する場合は、お肌の状態をみながらご使用ください。お肌に異常がある場合は、すぐに使用を中止してください。

ヘッド部(お肌に触れる部分)は、常に清潔な状態で使用する。  
肌トラブルの原因となります。

途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、使用を中止する。  
お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。  
表面に損害を与える原因、また故障の原因となります。



必ず守る

# HariFace

## ハリフェイス 6大ポイント

ハリフェイスは専用ジェルが不要!

さらに素肌はもちろんメイクした状態でもお手軽に使用できる美顔器です。



専用ジェル不要



素肌やスキンケア中はもちろん  
メイクをした状態でも使える



1～30段階の幅広い  
出力レベルで集中ケア



24K GOLDメッキ加工



充電不要!乾電池で  
約3ヶ月\*使用可能  
※1日15分使用の場合の目安



軽量コンパクトで  
長時間使用もラクラク



## 使いかたの流れ

### 1 電源をONにする

電源ボタンを長押し(約1秒)する。  
※初回使用時は電池を装着してから電源をONにしてください。

### 2 【初めて使用する方】お肌へのプレテスト

BLUEモードに設定し、出力レベル1で約30秒間腕の内側にあてる。

### 3 使用するモードを選ぶ

モード選択ボタンを押してください。

### 4 出力レベルを設定する

出力レベルボタンを押して調整する。

### 5 お肌にあてる


素肌やスキンケア中、メイクをした状態で使用可能。

### 6 電源をOFFにする

電源ボタンを長押し(約1秒)する。  
※電源がOFFになると「ピリリッ」と音が鳴り、ランプが消灯します。

※【本体】使いかた (P9~11) をよくお読みください。

## 【本体】各部のなまえ

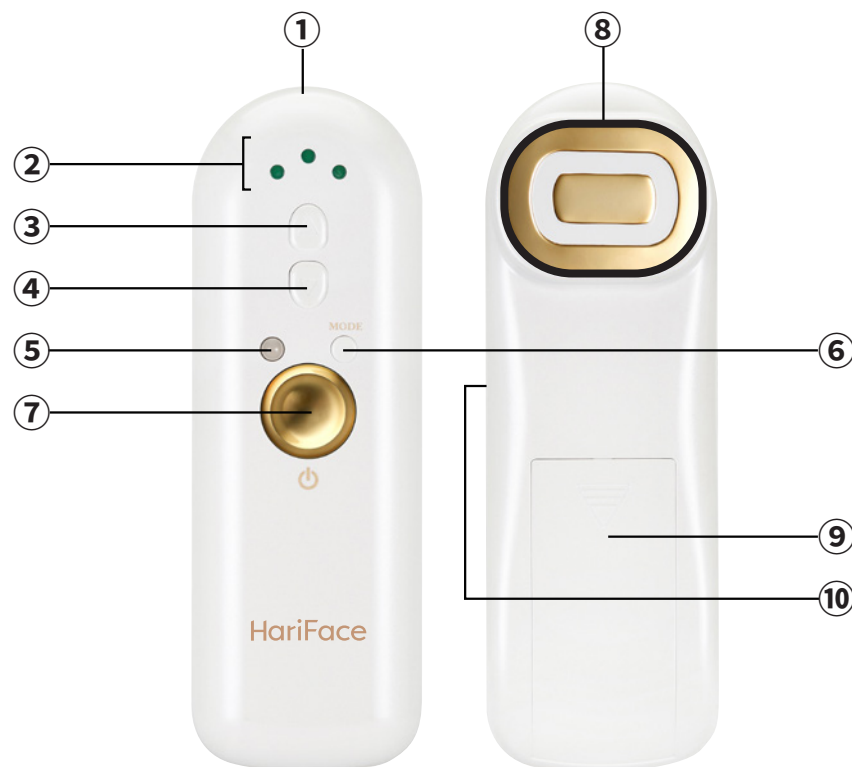

①	本体
②	出力レベルランプ
③	出力レベル+ボタン
④	出力レベル-ボタン
⑤	電源/モードランプ

⑥	モード選択ボタン
⑦	電源ボタン
⑧	ヘッド部 (24K GOLDメッキ)
⑨	電池カバー
⑩	接続用ジャック

## 【本体】使いかた

### お肌へのプレテスト

本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため、必ずお肌との相性を確認(プレテスト)してください。

1. 電源をONにしてBLUEモードに設定します。
2. 出力レベルは1のまま、腕の内側にヘッド部を約30秒間押しあてます。
3. お肌に異常がないことを確認します。24時間以内にお肌に赤みやほてりを感じなければ、本製品をご使用いただけます。



注意

- 肌トラブルを防止するため、必ず事前に実施してください。
- 実施部位に発疹、発赤、かゆみなどの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止してください。
- お肌に異常が生じていないか、よく注意して使用してください。お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。

### 使用方法

1. 電源ボタンを長押し(約1秒間)して電源をONにします。電源がONになると「ピッ」という音が鳴り、ランプが点灯します。
2. 使用するモードを選択します。モード選択ボタンを連続して押すたびに、モードランプの色が切り替わります。
  - BLUE(リンパ<sup>※</sup>)モード: 青色ランプ
  - RED(美顔)モード: 赤色ランプ
  - GREEN(ボディ)モード: 緑色ランプ

※モード名

3. モード選択後、ヘッド部を肌にあて、肌の状態に合わせて出力レベルを調整します。

電源をONにした状態の出力レベルは「1」です。  
電源を切るたび、設定したモードと出力レベルはリセットされます。

4. 各モードごとにケア方法をご紹介します。  
記載内容に従ってヘッド部を各ポイントにあて、ケアをします。  
(詳しくはP17～19をご確認ください。)  
その他、お肌で気になる部位にヘッド部をあて、ケアを行ってください。

#### Point

BLUEモードまたはGREENモードを先に行い、最後にREDモードの順番で使用することをおすすめします。

5. ご使用后、電源ボタンを長押し(約1秒)して電源をOFFにします。電源がOFFになると「ピリリッ」と音が鳴り、ランプが消灯します。

電源をONにしてから約20分経過すると、自動電源OFF機能が作動し  
ピリリッと音が鳴り自動的に電源がOFFになります。

### ご使用時のお肌の状態について

#### ● 出力の強さを感じやすい順番

スキンケア中<sup>※</sup>



素肌



メイクをした状態

スキンケア中<sup>※</sup>に使用する場合、出力レベルを1(最小)に設定してご使用ください。メイクをした状態と比べ、出力の強さを感じやすいです。お肌の状態に合わせて、出力レベルを調整してご使用ください。

※シートマスク使用中、化粧水や美容液塗布後など

## 電池の交換について

電池交換の目安	ピピピ〜と通知音が約10秒間鳴り続けた後、電源がOFFになります。
用意するもの	アルカリ乾電池 9V型 1本 <b>当製品はアルカリ乾電池 9V型専用です。</b>
電池の交換方法	<p>①電池カバー上部のへこみ部分を軽く押しながら、下にスライドさせ電池カバーと電池を外します。</p> <p>②+極・-極の向きに合わせて、電池の平ら部分を先にはめ込んでから、電池を挿入します。</p> <p>③電池カバーを取り付けます。</p>



## お手入れの方法について


汚れが付着しているとき	本体の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。ヘッド部※の汚れが気になる場合は、アルコール(エタノール)で濡らした柔らかい布で軽く拭き取ってください。 ※ヘッド部以外にはアルコール(エタノール)を使用しない。
使用後の保管	本体やヘッド部を柔らかい布できれいに拭いた後、専用ポーチに入れて直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。



注意

- 本体のヘッド部は24K GOLDメッキです。性質上、純金は柔らかい為、お取り扱いにはご注意ください。
- メッキが剥がれた場合でも、効果は変わりません。安心してご使用ください。
- ヘッド部(24K GOLDメッキ)の剥がれ・キズは保証対象外であり、有償での修理も致しかねます。

## 【付属品】各部のなまえ

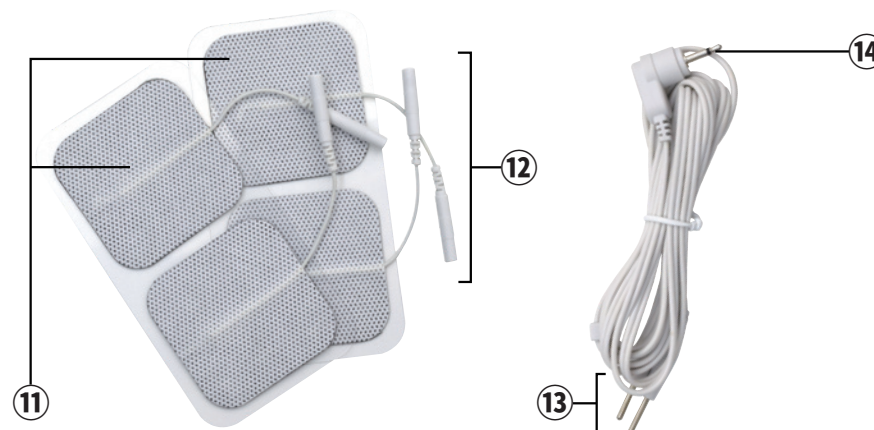

※ボディ用粘着パッドのカラーは、予告なく変更する場合があります。

⑪	ボディ用粘着パッド
⑫	ボディ用粘着パッドジャック

⑬	ボディ用粘着パッドプラグ端子
⑭	本体接続用プラグ端子

## 【付属品】 使いかた



### ご使用前に

粘着パッドをお肌に貼る前に、**蒸しタオル等できれいに拭きます。**

※汗やほこり、油分を含むクリームが付着している場合、粘着力が落ち粘着パッドが剥がれやすくなります。

### 使用方法

1. 粘着パッドジャックと粘着パッドプラグ端子を接続します。  
HariFace本体の電源をOFFにした状態で、HariFace本体側面の接続部に本体接続用プラグ端子を「カチッ」と音が鳴るまでしっかり差し込んでください。
2. 粘着パッドをシートから剥がし、ケアしたい部位に粘着パッドを貼り付けます。
3. 電源ボタンを長押し(約1秒間)して電源をONにします。  
使用するモードを選択し、お肌の状態に合わせて出力レベルを調整します。
4. ご使用后、電源ボタンを長押し(約1秒)して電源をOFFにします。  
電源がOFFになると「ピリリッ」と音が鳴り、電源/モードランプが消灯します。
5. 粘着パッドをお肌から剥がします。  
使用後は粘着パッドをお手入れしてください。  
(お手入れ方法はP13をご確認ください。)

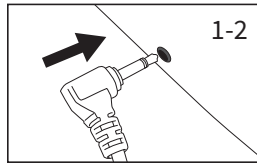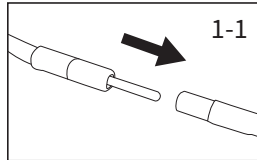

### 【使用するまでの流れ(クイックガイド)】

粘着パッドのケーブルとケーブル単体を接続する → 本体にケーブルを差し込む → 粘着パッドを貼り付ける

### 【使用後の流れ(クイックガイド)】

本体と繋がっているケーブルを抜く → 粘着パッドと繋がっているケーブルを抜く → 粘着パッドを剥がす。

※粘着パッドと繋がっているケーブルを抜く時は、ケーブル端子の根元部分をしっかり持って抜いてください。



注意

粘着パッドをシートやお肌から剥がす際、**コード以外の部分を持って粘着パッドを剥がしてください。**

コードを強く引っ張ると、電極が剥離し通電不良の原因となります。

### お手入れの方法について

<b>汚れが付着しているとき</b>	汚れが付着し粘着力が低下した場合、粘着パッドの粘着面に少量の水を垂らし、汚れを取り除いてください。 ※コード部分に水がかからないようご注意ください。 ※過激に水をつけたり、浸したりすると粘着パッドが劣化します。粘着パッド表面に、水分が多い場合は吸水性の高いスポンジ等で余分な水分を取り除いてください。
<b>使用後の保管</b>	使用後は粘着パッドを乾燥させないようにシートに戻し、チャック付きの袋に入れて密封してください。 高温を避け、次の使用まで冷暗所で保管してください。




警告

粘着力の低下した粘着パッドを使用すると、火傷を発生させる恐れがあります。  
身体に貼り付けても、粘着パッドの端からめくれて浮いてきたり、接続した電極コードや電極ケーブルの重みだけで粘着パッドが剥がれてしまう場合は、新しいものに交換してください。

## Vポール／Hポールの各部のなまえ

※Vポール／Hポールは別売り

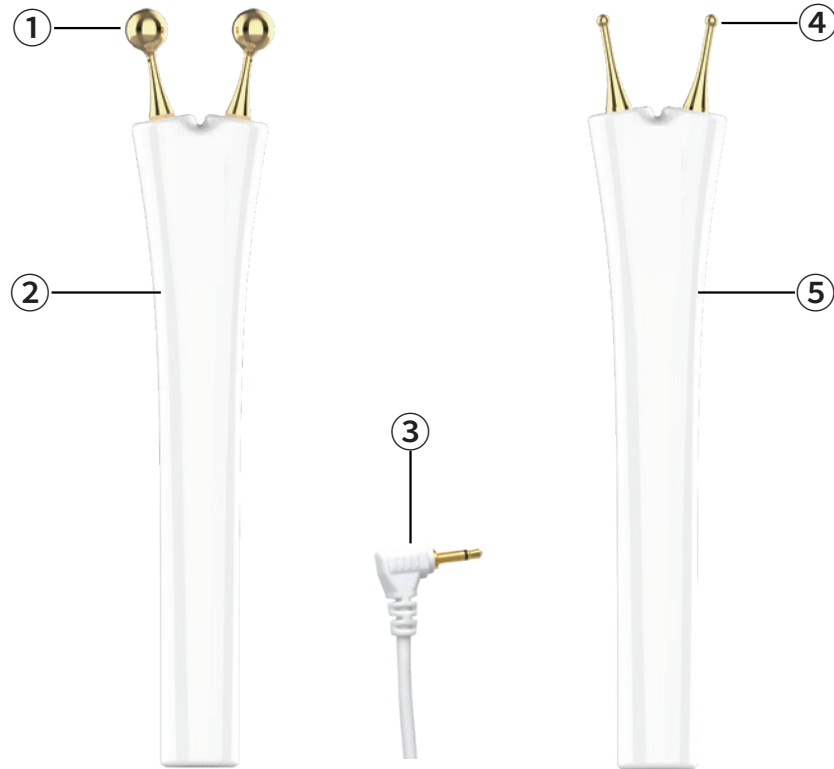

①	Vポールヘッド部 (24K GOLDメッキ)
②	Vポール本体
③	本体接続用プラグ端子


④	Hポールヘッド部 (24K GOLDメッキ)
⑤	Hポール本体

## Vポール／Hポールの使いかた

※Vポール／Hポールは別売り


### Vポール／Hポールの使用方法

1. 電源をOFFにした状態で、Vポール／Hポールのケーブル端子を、本体側面の接続部に「カチッ」と音が鳴るまでしっかり差し込んでください。

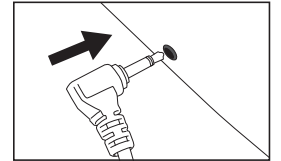

2. 電源ボタンを長押し(約1秒間)して電源をONにします。
3. 使用するモードを選択します。

4. 【Vポール】  
モード選択後、ヘッド部をお肌にあて、お肌の状態に合わせて出力レベルを調整します。

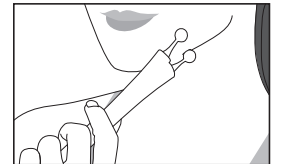

5. 【Hポール】  
モード選択後、ヘッド部を頭皮にあて、頭皮の状態に合わせて出力レベルを調整します。



6. ご使用后、電源ボタンを長押し(約1秒)して電源をOFFにします。電源がOFFになると「ピリリッ」と音が鳴り、ランプが消灯します。

製品の特性上、本体およびVポール/Hポール両方のヘッド部から刺激を感じますが、**ご使用の際は本体またはVポール/Hポールどちらか片方のみご使用ください。**



## モードの種類

### BLUE (リンパ※)モード ブルーモード

お肌の環境を整えるモードです。 ※モード名

### RED (美顔)モード レッドモード


お肌の各部位にあてるエイジングケア\*モードです。ハリ・弾力のある毎日へ導きます。  
※年齢に応じたお手入れのこと

### GREEN (ボディ)モード グリーンモード

首やデコルテ、からだの気になる各部位にあてるモードです。

ケア中、他の部分に比べてひりひりしたり、出力の強さをより感じられる部位がある場合、その部位を集中的にケアすることをおすすめします。

## 各モードのケア方法

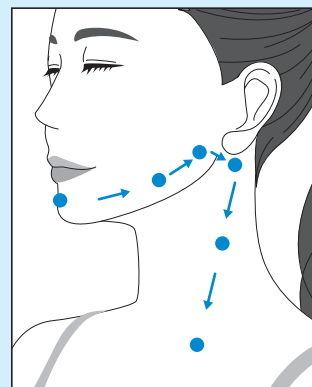

本体


Vポール

Hポール

### フェイスラインのひきしめケア

1. あご先にヘッド部を約1分間押しあてます。
2. あご先のケア後、図のように各ポイントにあてケアします。
3. 反対側も同じ方法で進めます。

フェイスラインのケアをされる方は、**BLUEモードの使用をおすすめ**します。

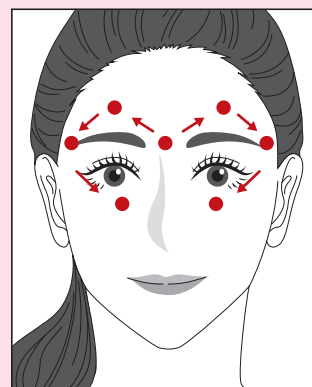

本体

Vポール


Hポール

### 目もとの弾力ケア

1. REDモードに設定します。
2. 眉間にヘッド部を約1分間押しあてます。
3. 眉間のケア後、図のように目のまわりの各ポイントにあてケアします。



ヘッド部が腫に触れると大変危険ですので、目の周辺部分は注意して使用してください。

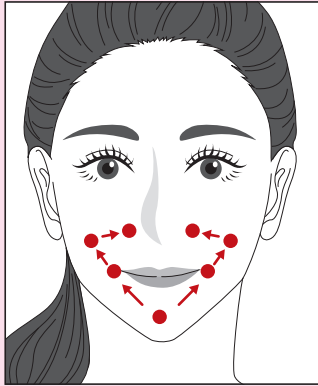


本体

Vポール

Hポール

### 口もとの弾力ケア

1. REDモードに設定します。
2. あご先にヘッド部を約1分間押しあてます。
3. あご先のケア後、図のように口もとのラインに沿って各ポイントにあてケアをします。

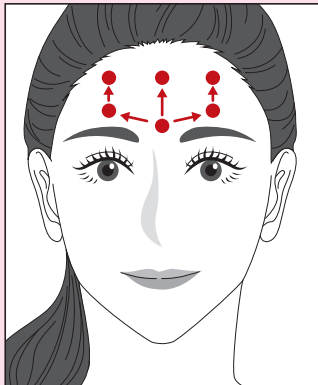

本体

Vポール

Hポール

### 額の弾力ケア

1. REDモードに設定します。
2. 眉間にヘッド部を約1分間押しあてます。
3. 額の中央部分をケアした後、図のように額まわりの各ポイントにあてケアをします。



注意

- ポイント1か所あたりの使用目安時間は約30秒～1分程度です。
- 約10～20分の使用時間を目安としてください。
- 同じポイントに1分以上あて続ける場合は、お肌の状態をよく確認しながら使用してください。お肌に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。

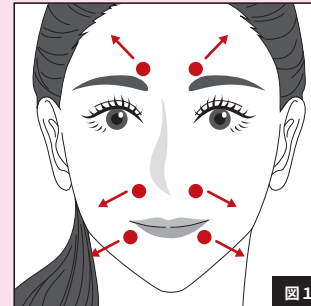


図1

▲ 眉間・口もとのケアポイント

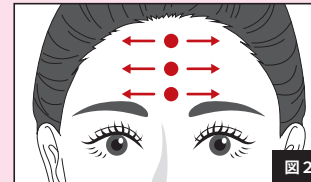


図2

▲ 額周りのケアポイント

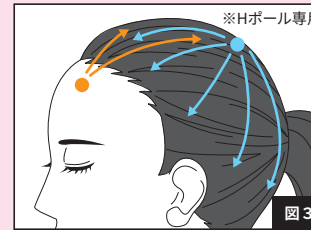


図3

▲ 頭頂部・額のケアポイント

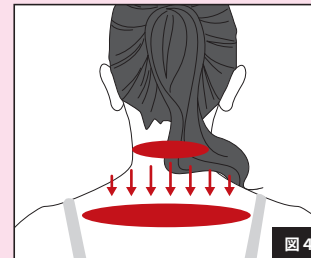


図4

▲ 首のケアポイント

本体

Vポール

Hポール

### 頭皮ケア

本体とHポールを使用し、頭皮のケアを行う方法です。

1. REDモードに設定します。
2. 本体で、眉間・口もと(図1)、額周り(図2)の各ポイント部分を矢印方向に向かって、ヘッド部を約1分間ずつ押しあてます。
3. 本体の電源を一度OFFにします。V/Hポールを接続し、REDモードに設定します。
4. V/Hポールで頭頂部・額部分(図3)を矢印方向に向かって、撫でるようにヘッド部を各約5分間ずつ押しあてます。特に抜け毛が気になる箇所は、集中的にケアしてください。



ヘッド部が腫に触れると大変危険ですので、目の周辺部分は注意して使用してください。

5. 本体またはV/Hポールで首部分(図4)を矢印方向に向かってヘッド部を約2分間ずつ押しあてます。
6. 最後に額周り(図2)の各ポイント部分を矢印方向に向かって、ヘッド部を約2分間ずつ押しあてます。

Point

頭皮ケアは約2ヶ月間程度、継続してケアすることをおすすめします。

## よくある質問

- Q. 電源が入りません。
- A. 電池が正しく挿入されているか確認し、再度電源をONにしてください。改善しない場合、お買い上げ販売店またはお客様窓口までお問い合わせください。
- Q. この製品は防水仕様ですか？
- A. 本体のヘッド部は防水仕様となっておりますが、ボディ部分は非防水仕様となっております。その為、本体を水で洗ったりすることは絶対におやめください。製品のお手入れ方法は10ページをご確認ください。
- Q. ピピピッと音が鳴り続け、電源がOFFになってしまいます。
- A. 電池切れの通知音です。新しいアルカリ乾電池に交換してください。電池の交換方法は10ページをご確認ください。
- Q. この製品は毎日使用できますか？
- A. 毎日ご使用いただけます。ポイント1か所あたりの使用目安時間は、約30秒～1分程度です。約10～20分の使用時間を目安としてください。同じポイントに1分以上あて続ける場合は、お肌の状態をよく確認しながら使用してください。お肌に異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- Q. アルカリ乾電池以外の電池を使用してもいいですか？
- A. 当製品はアルカリ乾電池専用美顔器となりますので、アルカリ乾電池以外の電池のご使用はおやめください。
- Q. 妊娠中や授乳中に使用できますか？
- A. 妊娠中は大変敏感な状態となっておりますので、ご使用はお控えください。授乳中のご使用は問題ございません。
- Q. 本体を使用しながらVポールまたはHポールの使用はできますか？
- A. 製品の特性上、本体とVポールまたはHポールを接続した際、両方のヘッド部から刺激を感じますが、ご使用の際は本体またはVポール/Hポールのどちらか片方のみご使用ください。

- Q. メイクをした状態やスキンケア中に使用できますか？
- A. 使用できます。詳しくはP9をご確認ください。  
スキンケア中に使用する場合、出力レベルを1(最小)に設定してご使用ください。メイクをした状態と比べ、出力の強さを感じやすいです。お肌の状態に合わせて、出力レベルを調整してご使用ください。
- Q. 敏感肌なのですが使用できますか？
- A. 始めに「お肌へのプレテスト」をお試しいただき(P8)、お肌の様子を確認してください。お肌に異常がなければご使用いただけます。お肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。ご自分で判断が難しい場合は医師にご相談ください。
- Q. 医療手術・美容整形手術をしている場合使用できますか？
- A. 施術後2週間はご使用を控えていただき、その後必ず医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。
- Q. 肌にヘッド部をあてると、ピリピリ(チクチク)感があります。
- A. ピリピリ(チクチク)を感じる程度の出力の強さでケアを行ってください。ご使用時のお肌の状態に合わせて、出力レベルを調整してください。またお肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- Q. ヘッド部の金メッキが剥がれました。使用に問題はありますか？
- A. ご使用には問題ありません。ヘッド部(24K GOLDメッキ)の剥がれ・キズは保証対象外であり、有償での修理も致しかねます。

## 製品仕様

本体サイズ	約W146×D49×H34mm
質量	約90g(電池挿入時約130g)
電源	アルカリ乾電池 9V型 ※当製品はアルカリ乾電池専用です。
自動電源OFF	約20分後自動電源OFF
出力レベル	1～30段階
付属品	テスト用乾電池、収納ポーチ、ボディ用粘着パッド(2枚セット)
備考	ヘッド部:24K GOLDメッキ
	乾電池交換周期(目安): 1日15分使用で約3ヶ月使用可能
	防水仕様:ヘッド部のみ

※商品改良のため、仕様・外観・カラー、付属品等を予告なく変更する場合がありますのでご了承くださいませ。  
※本製品を破棄される場合は、各自治体の分別ルールに従って破棄してください。

発売元 株式会社UGコスメティクス

販売元 セキュネット株式会社

〒460-0002  
愛知県名古屋市中区丸の内3-19-1

／ HariFace公式LINE ／

LINE ID:960ywaua

●商品のご注文 ●新商品情報  
●お問い合わせ ●メディア情報



## 保証規定

- 通常のご使用において故障が発生した場合、お買い上げ日から1年間保証いたします(消耗品、付属品は除く)。お買い上げ販売店もしくは弊社お客様窓口まで製品をお持ち込みください。  
※ヘッド部(24K GOLDメッキ)の剥がれ・キズは保証対象外であり、有償での修理も致しかねます。
- お客様ご都合の返品は、未開封\*・未使用・未通电のもので、商品ご到着後8日以内にお買い上げ販売店へご連絡いただいたもののみお受けいたします。  
※未開封とは、商品パッケージの封印シールを開封していない状態です。
- 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、本製品・本保証書・正規販売店による購入証明書(レシート等)をお買い上げ販売店にご提示のうえ、ご相談ください。
- 保証期間中でも、次の場合は有償修理となります。
  - ①使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
  - ②一般家庭用以外(業務用)などで使用された場合に生じる故障および損傷。
  - ③車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障および損傷。
  - ④お買い上げ後の輸送・移動・落下・転倒など衝撃を与えたことが原因の場合。
  - ⑤火災・地震・水害・その他の天災地変、公害などによる故障および損傷。
  - ⑥電池などの消耗部品・付属品などの部品交換の場合。
  - ⑦指定外の電源を使用したことが原因の場合。
  - ⑧その他、取扱説明書に記載されていない使用方法が原因の場合。
  - ⑨保証書のご提示がない、購入証明書の確認ができない場合。
  - ⑩保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。また、修理時の製品発送費用はお客様のご負担となります。  
【技術料】診断・修理・調整・点検・往復送料などの費用  
【部品代】部品および補助材料代
- 転居等により購入店舗へ持込修理の依頼ができない場合は、購入証明書(レシート等)をご用意のうえお客様窓口までご連絡ください。また贈答品につきましては、贈答者より購入証明書(レシート等)または、販売元認定オンラインショップでご購入の場合はショップ名・注文番号をご確認のうえ、お客様窓口までご連絡ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This is warranty is valid only in Japan.

# 保証書

持込修理対象商品

製品名	ハリフェイス HariFace
品番	HF-MG01

製造番号※	
保証期間	お買い上げ日から1年間 (消耗品、付属品は除く)

※販売店名	店名・住所・電話
	ご購入日の分かる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。

※印の全てに記入が必要です。

## <ご注意>

保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。ネットオークション、フリーマーケット、リサイクルショップなどにより第三者から購入したり、譲渡された場合の購入の確認や使用経緯の確認が出来ない製品につきましては本保証は適用されません。

また、正規販売店による購入証明書(レシート・納品書等)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。

- 本保証規定は予告なく変更されることがあります。
- 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
- ご使用による劣化・消耗および、付属品・消耗品の交換は有償となります。